


## PRODUCT FUNCTION

### エレクトロポレーション

安定した電気パルスが、有効成分を細胞膜の奥へ。


皮膚表面の細胞膜に一時的に穴をつくりだすことで、普段はバリアによって通過できない有効成分を届けます。ティレットは、まっすぐきれいな安定した波形を出力。他社と比べて深いところまで一気に届けやすくします。

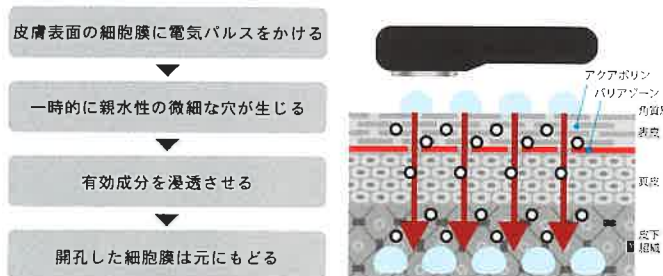

### EMS+バイブレーション

微弱な電気信号により、  
筋肉運動と同様の筋収縮を。


筋肉運動をして毛幹を刺激することで毛の成長因子(グロースファクター)を活性化。有効成分の隅々まで広げます。さらにバイブレーション効果で頭皮を柔らかくすることができます。

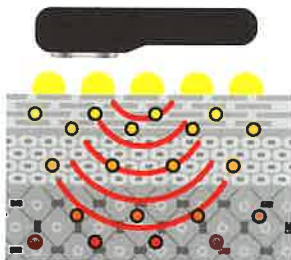

### 低出力レーザー光線

細胞の活性化により、  
肌周期の正常化を促進。

皮膚表面から約3mmまで届くと言われています。医療業界では脱毛効果が認められています。

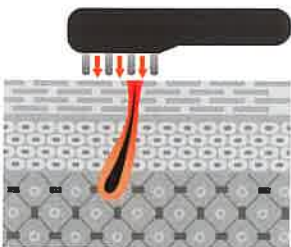

## PRODUCT DETAILS

- 品名: TILLET (ティレット)
- 価格: 98,000円(税抜)
- カラー: ブラック、ホワイト
- サイズ: 縦140mm × 幅60mm × 高さ67mm
- 重量: 140g(乾電池含む)
- 電源: 充電式リチウム電池 7.4V/430mA
- 保証: 本体保証1年間
- 耐水性: 生活防水
- 材質: 本体 (ABS塗装仕上げ)、導子 (ABS硬質3価クロムメッキ)、LEDレンズカバー (ポリスチレン)
- 付属品: 充電用ACアダプター (USBケーブル)、フェイス用アタッチメント、取扱説明書 (保証書)
- 生産国: 日本
- メーカー: WQC (株式会社渡久クリエイト)



お問い合わせ先

**WQC** [製造元 / 販売元]  
株式会社 渡久クリエイト

〒213-0011 神奈川県川崎市高津区久本 3-10-9  
TEL: 044-822-0388 <http://www.wqc.tokyo/>

## 究極の多機能美顔器

# TILLET

## W-GEAR



MADE IN JAPAN

<http://www.wqc.tokyo/>

# FOR HAIR

育毛 / 発毛促進

※専用アタッチメントをつけた状態でご使用ください。※ご使用前に、お使いの化粧水または美容液を塗布してください。※お手入れする箇所には、使用すること化粧水や美容液を塗布し、必ず濡れた状態でご使用ください。お肌表面の水分が不十分な状態ですと、通電が不十分になる場合があります。※施術の際は、2つの導子が同時に肌に触れるように軽く当てながら行ってください。




### 生え際から頭頂部

生え際から頭頂部までは、皮脂が多く出やすいところ。生え際から頭頂部までゆっくり動かしていきます。




### 耳周辺から頭頂部

耳周りはリンパが集中してあるところなので溜まりやすい場所です。耳の下あたりから髪をすくうように地肌を持ち上げ頭頂部に向け地肌を動かしてほくしていきます。

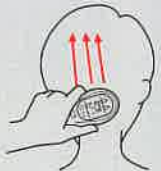

### えりあしから頭頂部

頭頂部は頬を持ち上げて顔全体を支えている部分です。首の付け根から頭頂部までゆっくり上に動かします。

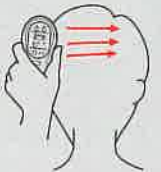

### 頭頂部

頭頂部は紫外線にあたりやすく、ダメージが大きい場所です。左から右へ(または右から左へ)ゆっくり動かします。

## 1台で2役。 プロ仕様の本格的な 頭皮ケア・肌ケアを。

### ◆ 生活防水

水洗いも可能なIPX4の耐水性。

### ◆ イオン導入

イオンの力を利用して、美容成分をお肌の奥まで。

### ◆ エレクトロポーション

電気パルスを瞬時に流すことで、美容液や育毛剤の吸収率が飛躍的に向上。

### ◆ EMS

微弱電流が筋肉を刺激して、導入美容液・育毛剤をもみ広げる。

### ◆ LEVEL

1~10まで電流を微調整できる出力レベル。

### ◆ LED照射

650nmのLEDが細胞の活性化を促進。

### ◆ バイブレーション

微振動で大腦を刺激して、トリートメント効果UP。



リフトアップ



鎖骨



頬



ほうれい線



目尻



保湿



首のライン



シミ・しわ



※ご使用前にシャンプーをし、しっかりタオルドライをおこなってください。※施術の際は、お使いの育毛剤を頭皮に十分に付け、12本の導子が同時に頭皮に触れるように軽く当てながら、上図を参考に施術してください。

美肌 / リフトアップ

# FOR FACE